



ХВАТКА

МАССАЖЕР
ДЛЯ РУК

KR-B020



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!

Перед использованием массажера для рук «Хватка» внимательно изучите данное руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора.....	2
Меры предосторожности.....	2-4
Устройство массажера.....	4
Использование массажера	5
Выявление и устранение неисправностей	6
Хранение и уход.....	7
Технические характеристики	7

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Массажер для рук «Хватка» – современный и функциональный прибор для бережного ежедневного массажа кистей, способствующего улучшению кровообращения и заботе о суставах.

Прибор «Хватка» сочетает в себе несколько функций: разминающий роликовый массаж, воздушно-компрессионный массаж, тепловое воздействие. Это позволяет комплексно проработать кисти рук и получить максимальный эффект и расслабление.

Кроме того, в массажере «Хватка» предусмотрена возможность регулировки интенсивности воздействия под потребности пользователя, а также выбор комплексного массажа всей кисти или отдельно зоны ладони и зоны пальцев.

Стильный дизайн и эргономичная форма аппарата делают его удобным для всех членов семьи. Компактный размер и небольшой вес позволяют брать массажер с собой в различные поездки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

2. Перед первым использованием осмотрите массажер для рук и убедитесь в отсутствии повреждений.

3. Во время массажа следите за

своим самочувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.

4. Если вы страдаете серьезными хроническими заболеваниями или проходите курс лечения, перед применением массажера проконсультируйтесь со специалистом.

5. Перед использованием рекомендуется консультация специалиста в следующих случаях:

- во время второй половины срока беременности;
- при наличии кардиостимулятора;
- при лихорадочном состоянии (температуре, ознобе);
- при остеопорозе 3-4 степени;
- при наличии злокачественных новообразований в зоне массажа;
- в 6-месячный период после операций, переломов, травм в зоне массажа;
- при наличии ран и прочих повреждений в зоне массажа;
- при наличии металлических конструкций в зоне массажа;
- при кожных заболеваниях и наличии повреждений кожного покрова в зоне массажа;
- при значительной острой деформации кистей;
- при повышенной чувствительности рук;
- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- и т.д.

6. При наличии повышенной термочувствительности с осторожностью используйте прибор, так как он имеет функцию нагрева.

7. Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.

8. Перед тем, как подключить прибор к электросети, убедитесь, что его напряжение соответствует напряжению в розетке.

9. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью и высоким атмосферным давлением.

10. Берегите прибор от попадания прямых солнечных лучей, пыли и загрязнений.

11. Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов.

12. Не допускайте контакта массажера с пожароопасными материалами, газами и жидкостями.

13. Не пользуйтесь массажером, когда у Вас мокрые руки.

14. Перед использованием массажера снимите все украшения и аксессуары (кольца, часы, браслеты и т.д.), которые попадают в зону массажа.

15. Не используйте прибор во время сна, а также в состоянии озноба и лихорадки, алкогольного и наркотического опьянения.

16. Не наносите гели, кремы и другие косметические средства на устройство или на руки перед использованием и во время использования массажера.

17. Никогда не вытаскивайте и не трогайте штепсельную вилку и шнур питания мокрыми руками.

18. Не вставайте, не садитесь на прибор, не кладите на него тяжелые предметы, не роняйте его.

19. Не сгибайте, не затягивайте, не завязывайте шнур питания.

20. Не допускайте попадания воды в устройство и на его поверхность.

21. Ни в коем случае самостоятельно не модифицируйте, не ремонтируйте, не разбирайте массажер. При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр «Витал Райз».

22. Не используйте массажер, если тканевое покрытие в зоне массажа прорвалось. Обратитесь в сервисный центр.

23. При возникновении каких-либо повреждений шнура питания или самого прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

24. Не используйте провода, переходники, прочие запчасти и аксессуары других производителей.

25. Не используйте массажер во время грозы, отключайте его от электросети.

26. При возникновении каких-либо отклонений в работе прибора (например, запаха дыма, нетипичного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование, отключите от электросети и обратитесь в сервисный центр.

27. Отключайте массажер от электросети, когда вы его не используете.

28. Небольшой шум во время работы массажера является нормальным и не свидетельствует о неисправности.

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА




1. Положение руки во время массажа




2. Адаптер питания (12 В, 1500 мА)


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

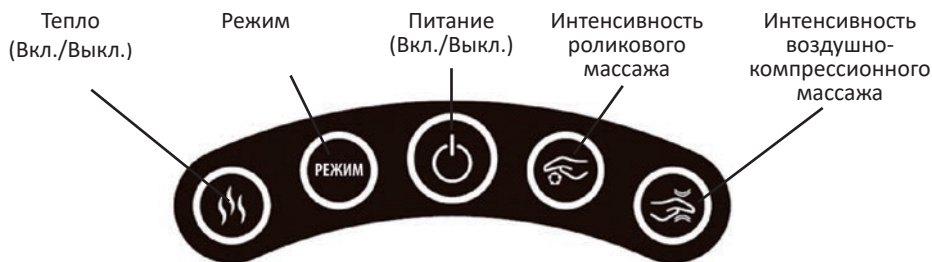

Подключение к электросети: подключите шнур питания в разъем массажера, затем включите блок питания в розетку.

Подготовка к массажу: удобно расположите руку, которая нуждается в массаже, внутри массажера.


Начало использования: нажмите на кнопку «Питание» , загорится светодиодный индикатор и массажер начнет работу в автоматическом режиме.

Изменение режима массажа: нажмите на кнопку «Режим» , устройство изменит режим работы:


Синий цвет индикатора: автоматический режим, устройство выполняет полный массаж кисти. Рекомендуется расположить руку максимально глубоко в массажере, чтобы маленькие массажные ролики попадали на пальцы, а большие массажные подушки – на ладони.


Фиолетовый цвет индикатора: режим массажа пальцев, устройство сосредоточено на массаже пальцев. Рекомендуется расположить руку максимально глубоко в массажере, чтобы маленькие массажные ролики задействовали пальцы.

Красный цвет индикатора: режим массажа ладони, устройство сосредоточено на массаже ладони. Расположите кисть так, чтобы воздушные подушки полностью задействовали ладонь.

Прекращение работы массажера: нажмите на кнопку «Питание» , и массаж прекратится.

Использование функции прогрева: функция прогрева включается автоматически при начале работы массажера. Чтобы ее отключить, нажмите на кнопку «Тепло» , тогда прогрев отключится и красный индикатор кнопки потухнет. Чтобы вновь включить функцию прогрева, нажмите на кнопку еще раз.

Изменение интенсивности разминающего роликового массажа: во время работы массажера нажмите кнопку «Интенсивность роликового массажа» , чтобы выбрать нужный уровень (по возрастанию интенсивности). Уровень 1 – синий индикатор, уровень 2 – фиолетовый индикатор, уровень 3 – красный индикатор.

Изменение интенсивности воздушно-компрессионного массажа: во время работы массажера нажмите кнопку «Интенсивность воздушно-компрессионного массажа» , чтобы выбрать нужный уровень (по возрастанию интенсивности). Уровень 1 – синий индикатор, уровень 2 – фиолетовый индикатор, уровень 3 – красный индикатор.

Автоматический таймер: время одного сеанса массажа по умолчанию составляет 20 минут. Массаж прекратится, когда время истечет. Для повторного проведения массажа включите прибор снова.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены примеры распространенных проблем, с которыми Вы можете столкнуться при использовании устройства, и способы их решения.

Если Вы не можете решить проблемы с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Устройство не работает.	<ol style="list-style-type: none">1. Блок питания не подключен или подключен неправильно.2. Устройство использовалось длительное время, поэтому была активирована защита от перегрева.3. Другая неизвестная причина.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что блок питания подсоединен правильно и светодиодный индикатор на кнопке питания мигает белым.2. Отключите устройство и дайте ему остыть в течение часа. Затем включите и продолжите использование.3. Обратитесь в сервисный центр.
Внезапная остановка во время массажа.	<ol style="list-style-type: none">1. Блок питания неисправен.2. Другая неизвестная причина.	<ol style="list-style-type: none">1. Отключите и подсоедините снова блок питания.2. Обратитесь в сервисный центр.
Во время работы массажер издает шум.	Шум создается из-за движения механических частей устройства.	Это нормально и не свидетельствует о неисправности.
Во время массажа палец выскакивает.	<ol style="list-style-type: none">1. Неправильное положение пальца.2. Слишком высокая интенсивность воздушно-компрессионного массажа.	<ol style="list-style-type: none">1. Остановите массаж и отрегулируйте положение пальца. Затем включите массажер снова.2. Отрегулируйте интенсивность воздушно-компрессионного массажа.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

УХОД

1. Не используйте для очищения прибора металлическую мочалку, абразивные и химические моющие средства.
2. Для очищения массажера используйте только сухую мягкую тканевую салфетку.

ХРАНЕНИЕ

1. После каждого использования отключайте устройство от сети.
2. Храните массажер в прохладном и сухом месте вдали от солнечных лучей.
3. Не помещайте на прибор тяжелые предметы.
4. Если корпус прибора поврежден или имеется какая-либо механическая неисправность, обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Массажер для рук «Хватка»
Модель	KR-B020
Питание DC	12 В, 1500 мА
Мощность	18 Вт
Вес нетто	1490 г
Вес брутто	1820 г
Размер упаковки	270 мм × 195 мм × 130 мм
Автоматический таймер	20 мин.



8-800-500-88-18
www.vital-rays.ru

EAC

ПРОИЗВЕДЕНО / PRODUCED:

RUIJIAN E-COZY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD.

Add: No. 168, Shidai Road, International Auto Industry Zone, Ruian City,
Zhejiang Province, China.

ПО ЗАКАЗУ / BY ORDER:

ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC

Адрес: 350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26
Add: 350012, Russian Federation, Krasnodar, Krugovaya str., 26.

